



Materiais que fazem a diferença®

Posicionamento do paciente, desde pediatria até bariátrica

Superfícies de apoio e posicionadores Action O.R. clinicamente comprovados

Posicionamento de
pernas, tornozelos e pés
p. 11




Sobreposições e capas
descartáveis para
sobreposições
p. 3

Posicionadores
de cabeça e
pescoço
p. 4

Posicionamento em
decúbito dorsal
p. 18

Posicionadores de
braço, ombro e
cotovelo
p. 6

Posicionadores para peito,
tronco e anca
p. 8

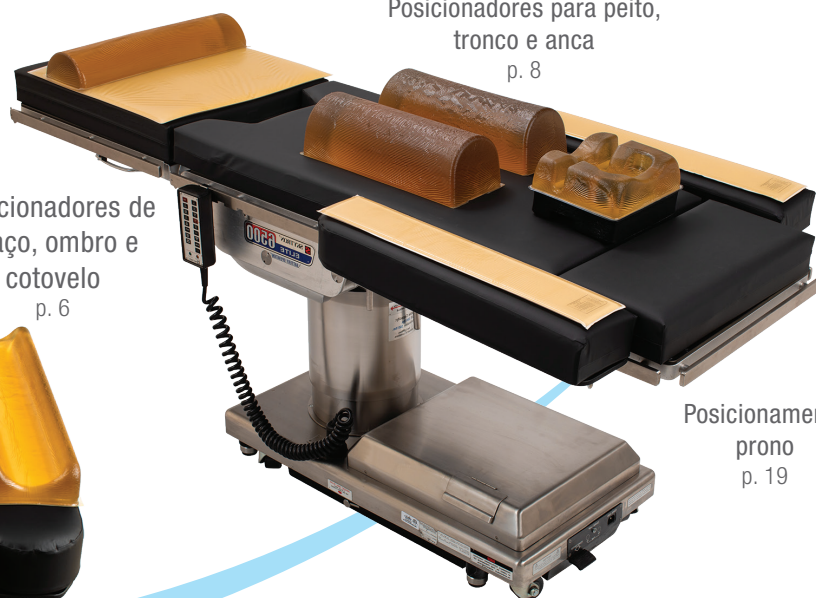

Posicionamento
prono
p. 19

Posicionadores pediátricos
e neonatais
p. 16



Akton® Benefícios do polímero p. 2



AMERICAN MADE
SINCE 1970





Vantagens do polímero viscoelástico AKTON


- Excelentes qualidades de redução do cisalhamento
- Película macia e flexível
- Aumenta a estabilidade do paciente
- Distribui uniformemente o calor e a pressão
- Clinicamente comprovado para ajudar a prevenir lesões por pressão
- Reutilizável e económico
- Não favorece o crescimento bacteriano
- Hipoalergénico
- Compatível com imagens
- Biocompatível
- Hipoalergénico
- Não fabricado com látex de borracha natural
- Sem ftalatos, plastificantes e silicone
- Sem DEHP




As nossas almofadas e posicionadores reutilizáveis são impermeáveis a fluidos, não favorecem o crescimento bacteriano, não vazam nem escorrem se perfurados e são fáceis de limpar e manter.



As qualidades de redução do cisalhamento dos produtos são reforçadas pela combinação da película exterior macia e flexível com o polímero equivalente ao tecido.

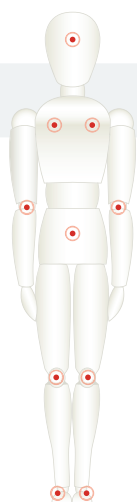

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA AS ÚLCERAS DE PRESSÃO:

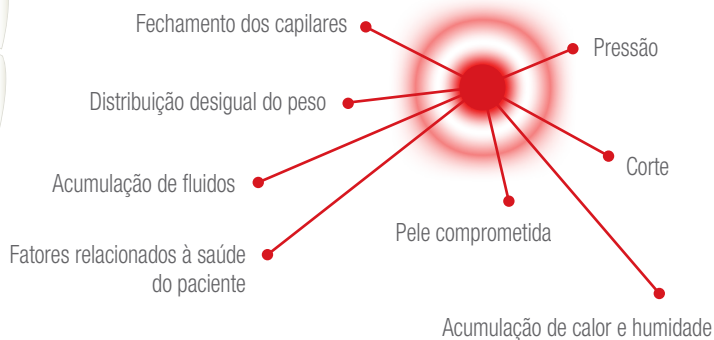

Como o nosso polímero patenteado reduz o risco...


O polímero ultramacio combinado com a superfície macia e flexível das nossas almofadas permite que o produto se mova com o paciente, reduzindo os efeitos negativos do cisalhamento na pele frágil. Além disso, o polímero Akton® distribui o peso e dissipa o calor, reduzindo o risco de pontos de alta pressão e desenvolvimento de pontos quentes que podem levar a lesões por pressão. Esses benefícios combinados aumentam a proteção do paciente.

Sobreposições



A sobreposição Action® O.R. é uma almofada de polímero versátil utilizada para uma ampla gama de procedimentos. As suas qualidades de redução de cisalhamento, combinadas com a capacidade de distribuir calor e pressão, tornam-na uma ferramenta valiosa para o controlo da pressão. Utilizada em procedimentos mais longos ou para pacientes com integridade cutânea frágil, a sobreposição é uma atualização acessível para almofadas de espuma básicas para mesas, que proporciona maior proteção ao paciente. As sobreposições são portáteis e podem ser trocadas entre salas, conforme necessário, e estão disponíveis em todos os tamanhos padrão de mesas de sala de operações, com 1,27 cm de espessura. Capas descartáveis estão disponíveis para modelos selecionados de sobreposições.

40105	Pequeno	20 L x 20 W x ½ H"	50.8 x 50.8 x 1.3 cm
40100	Médio	46 L x 20 W x ½ H"	117 x 50 x 1.3 cm
40109	Médio Grande	63 L x 20 W x ½ H"	160 x 50 x 1.3 cm
40101	Comprimento total	72 L x 20 W x ½ H"	183 x 50 x 1.3 cm
40103	Recorte perineal	46 L x 20 W x ½ H" com recorte	117 x 50.8 x 1.3 cm com recorte
40104	Conjunto de 3 peças	Ver A, B e C	
40104A	Cabeça	9 L x 20 W x ½ H"	22.9 x 50.8 x 1.3 cm
40104B	Torso com recorte perineal	39 ½ L x 20 W x ½ H"	100.3 x 50.8 x 1.3 cm
40104C	Pé com recorte perineal	20 L x 20 W x ½ H"	50.8 x 50.8 x 1.3 cm

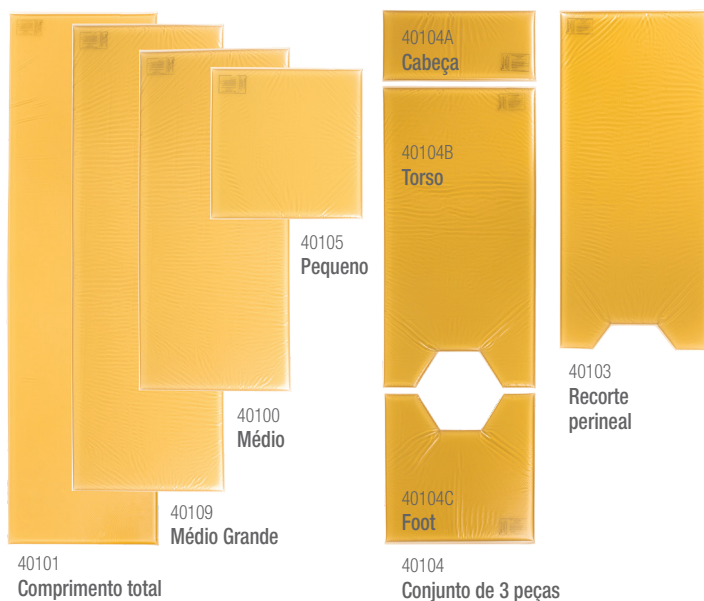

Diretrizes da AORN 2025, Prevenção de Lesões por Pressão

Seleção e utilização de superfícies de apoio, secção 3.2

“ Posicione os pacientes em superfícies que reduzam o potencial de lesões por pressão, redistribuindo a pressão e reduzindo o risco de movimentos involuntários. movimento do paciente.As superfícies estáticas, como as sobreposições de polímero viscoelástico (ou seja, gel), são projetadas para reduzir o cisalhamento e suportar o peso do paciente sem ficarem totalmente comprimidas sob o peso do corpo do paciente.^{5,46,74} As sobreposições de gel são radiotransparentes, sem látex e reutilizáveis.⁷⁴

Capas descartáveis


As capas descartáveis resistentes a fluidos e não esterilizadas da Action são feitas de um filme macio e flexível e estão disponíveis em dois estilos. Elas são projetadas para ajudar a reduzir a exposição a fluidos e prolongar a vida útil da sobreposição.

O estilo «fronha» é fechado numa extremidade e envolve totalmente a sobreposição como uma bainha.

O estilo «lençol ajustável» cobre a parte superior da almofada e é mantido no lugar por dois bolsos em cada extremidade da capa. Esta capa tem uma película de 4" que percorre o comprimento da capa em ambos os lados.

Lençol ajustável		
40800	Feito para o modelo de sobreposição 40100 - sobreposição média	Caixa c/ 25
40801	Feito para o modelo de sobreposição 40101 - sobreposição de comprimento total	Caixa c/ 25
40803	Feito para o modelo de sobreposição 40103 - médio com recorte	Caixa c/ 25
40805	Feito para o modelo de sobreposição 40105 - sobreposição pequena	Caixa c/ 25
Estilo fronha		
40102	Compatível com os modelos sobrepostos 40100 e 40101	Caixa c/ 25

Estilo fronha - capa de sobreposição de comprimento total

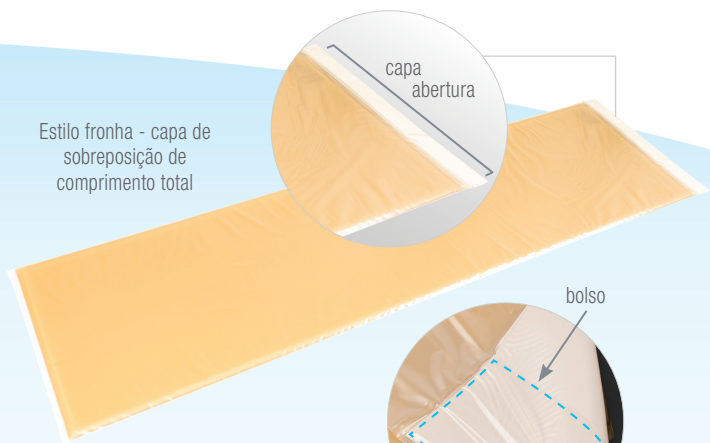


Estilo lençol ajustável - médio com recorte



Almofadas para a cabeça em forma de donut

Concebidas para proteger e apoiar a cabeça do paciente, estas almofadas facilitam o acesso à área cirúrgica da cabeça e pescoço. Podem ser utilizadas em diversos procedimentos, incluindo otorrinolaringologia, cirurgia plástica, cirurgia geral e oftalmologia.

40201	Adulto	8 OD x 3 ID x 1 ¾ H"	20.3 OD x 7.6 ID x 4.5 cm
40212	Adulto, Alto	8 OD x 3 ID x 3 H"	20.3 OD x 7.6 ID x 7.6 cm
40218	Adulto, largo	8 OD x 4 ½ ID x 1 ¾ H"	20.3 OD x 11.4 ID x 4.5 cm
40202	Pediátrico	5 ½ OD x 2 ¼ ID x 1 ¼ H"	14 OD x 5.7 ID x 3.2 cm
40219	Pediátrico/ Neonatal	4 ½ OD x 2 ID x 1 H"	11.4 OD x 5.1 ID x 2.5 cm
40203	Neonatal	3 ¼ OD x 1 ½ ID x ¾ H"	8.3 OD x 3.8 ID x 2 cm

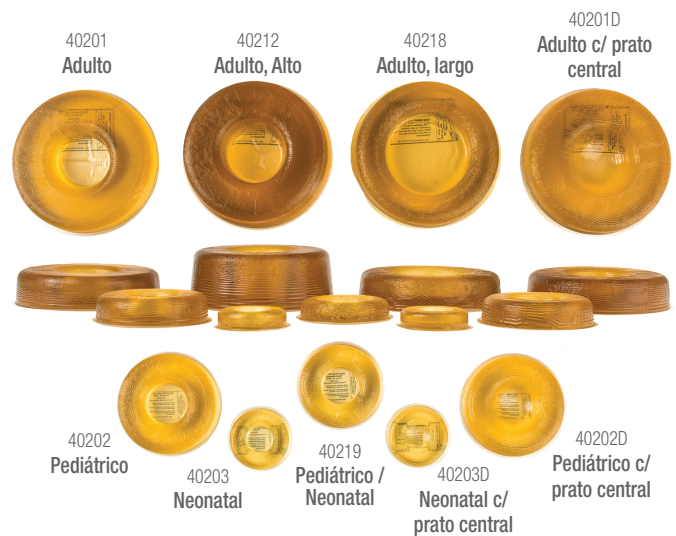

Almofadas para cabeça em forma de donut com prato central

40201D	Adulto c/ prato central	8 OD x 3 ID x 1 ¾ H"	20.3 OD x 7.6 ID x 4.5 cm
40202D	Pediátrico c/ prato central	5 ½ OD x 2 ¼ ID x 1 ¼ H"	14 OD x 5.7 ID x 3.2 cm
40203D	Neonatal c/ prato central	3 ¼ OD x 1 ½ ID x ¾ H"	8.3 OD x 3.8 ID x 2 cm



Almofada para cabeça em posição supina

A almofada para cabeça em posição supina apresenta uma construção de espuma e polímero de camada dupla.

A base de espuma de suporte tem um recorte circular de 6" posicionado sob a almofada de polímero macia e flexível.

O recorte na espuma permite que a almofada de polímero moderadamente côncava de 1 polegada mergulhe o occipício na almofada, criando um efeito de embalo que aumenta o contacto com a superfície, reduz a pressão e posiciona suavemente a cabeça.

Toda a almofada para a cabeça é revestida por uma película flexível resistente a fluidos para proteger a base de espuma porosa contra contaminantes e não deve ser removida.

40200	10 L x 9 W x 2 ¼ H"	25.4 x 22.9 x 5.7 cm
--------------	---------------------	----------------------



Almofada para a cabeça contornada

O design contornado proporciona estabilidade à cabeça do paciente enquanto este se encontra em posição supina.

40213	7 ½ L x 7 ½ W x 3" H (1 ½" contornado)	19.4 x 19.4 x 7.6 cm
--------------	--	----------------------



Almofada para a cabeça com cavidade central

Esta almofada para a cabeça moderadamente côncava, concebida para a posição lateral, reduz a pressão na lateral do rosto e da orelha do paciente.

40207	Adulto	9 L x 10 W x 1" H	22.9 x 25.4 x 2.5 cm
40221	Pediátrico	6 L x 6 W x 1" H	15.2 x 15.2 x 2.5 cm



Adulto



Pediátrico

Protetor de testa

O protetor de testa é semicircular com uma base plana. É utilizado para proteger a testa de bebés, crianças ou pacientes adultos da pressão exercida pelos tubos de oxigénio.

40208	2 ½ L x 1 ½ W x ¾ H"	6.4 x 4.1 x 1.6 cm
--------------	----------------------	--------------------







Encosto de cabeça inclinado

O nosso popular apoio para a cabeça em posição prona foi concebido para apoiar a cabeça do paciente numa posição reta, posição neutra durante procedimentos em decúbito ventral. O recorte central esculpido foi concebido para evitar pressão ao redor dos olhos, nariz e rosto. A superfície macia em polímero Akton® ajuda a reduzir o atrito na área de apoio da testa e do queixo. Os canais presentes na parte superior e na base da almofada proporcionam acesso ao tubo para o anestesilogista.



40216M	Médio	8 ¾ L x 7 ¾ W x 4 ¾ H	22.2 x 19.7 x 12 cm
40216L	Grande	10 ½ L x 9 W x 5 ¼ H	27 x 22.9 x 14 cm

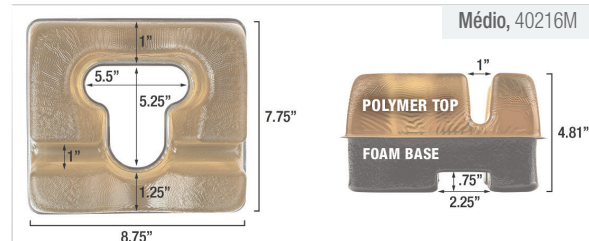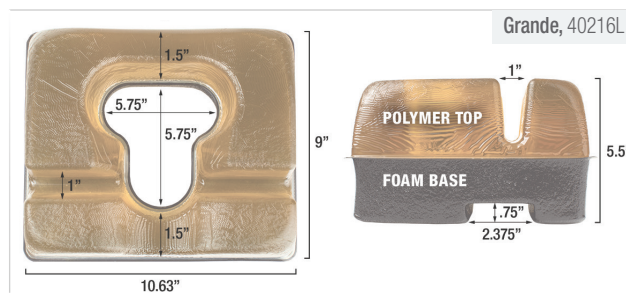

Oftalmologia Apoio de cabeça tipo berço

Os contornos exclusivos desta almofada para cabeça em posição supina oferecem amplo apoio para o pescoço do paciente, posicionando a cabeça numa cavidade oval central para reduzir a pressão e melhorar a estabilidade da cabeça durante a utilização. Adequada para a maioria dos procedimentos em posição supina, a almofada para a cabeça foi originalmente concebida para cirurgias oftalmológicas mais longas e possui duas áreas elevadas em cada lado da almofada para oferecer um apoio suave às mãos do cirurgião. Opção adequada para pacientes que necessitam de apoio adicional para o pescoço.

40217	Adulto	10 ½ L x 9 W x 2 ¾ H	26.7 x 22.9 x 6.7 cm
40217P	Pediátrico	8 ½ L x 7 ½ W x 2 ¼ H	21.6 x 19 x 5.7 cm

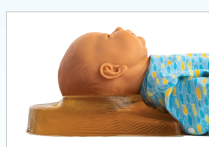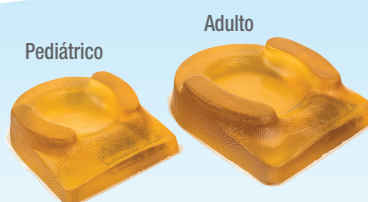

Pediátrico



Apoios de cabeça oftalmológicos

Este apoio de cabeça oftalmológico apresenta um recorte profundo e contornado que envolve a cabeça e ajuda a aumentar a estabilidade. Os seus lados robustos e macios foram concebidos para diminuir a fadiga do cirurgião e oferecer apoio ao pulso e à mão durante procedimentos oftalmológicos, faciais ou orais.




40209	Grande	10 L x 12 W x 3 ¾ H	25.4 x 30.5 x 9.8 cm
40210	Médio	10 L x 12 W x 2 ¾ H	25.4 x 30.5 x 7.3 cm

Almofadas para a cabeça em forma de ferradura

A configuração em ferradura proporciona uma passagem de ar livre e auxilia o anestesilogista enquanto os pacientes estão em posição lateral e prona, com a cabeça virada para o lado.

40204	Adulto	8 OD x 3 ID x 1 ¾ H"	20.3 OD x 7.6 ID x 4.5 cm
40211	Adulto, Alto	8 OD x 3 ID x 3 H"	20.3 OD x 7.6 ID x 7.6 cm
40205	Pediátrico	5 ½ OD x 2 ¼ ID x 1 ¼ H"	14 OD x 5.7 ID x 3.2 cm
40220	Pediátrico/ Neonatal	4 ½ OD x 2 ID x 1 H"	11.4 OD x 5.1 ID x 2.5 cm
40206	Neonatal	3 ¼ OD x 1 ½ ID x ¾ H"	8.3 OD x 3.8 ID x 2 cm

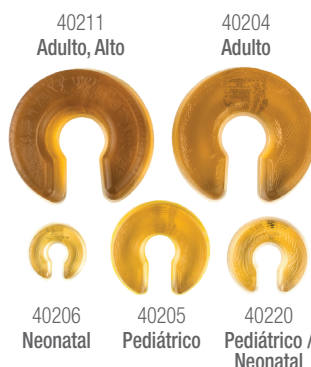



Almofada de apoio para mão/pulso

A almofada reutilizável em polímero oferece um posicionamento estável e confortável da mão e do pulso, substituindo as toalhas enroladas. Perfeita para apoio em casos de síndrome do túnel cárpico, canulação arterial, diálise e inserção de cateteres IV ou A-line.

40321 11 L x 3 1/2 W x 2 1/4 H" 27.94 x 8.89 x 5.7 cm



Mostrada com cinta estabilizadora



Mostrado com alça estabilizadora



40307 Pequeno

40310 Médio

40306 Grande

Almofadas contornadas para braços

O design contornado do apoio para os braços envolve o braço do paciente, proporcionando proteção total ao bíceps, cotovelo e antebraço. Laterais ligeiramente elevadas para ajudar a manter o braço posicionado com segurança.

				3/4" Deep Middle Channel
40307	Pequeno	16 L x 5 3/4 W x 2 1/4 H"	40.64 x 14.61 x 5.72 cm	
40310	Médio	20 L x 5 3/4 W x 2 1/4 H"	50.8 x 14.6 x 5.72 cm	
40306	Grande	24 L x 5 3/4 W x 2 1/4 H"	60.96 x 14.6 x 5.72 cm	



Protetor do nervo ulnar/antebraço

Esta almofada ajuda a proteger o nervo ulnar e todo o antebraço do paciente contra danos causados por pressão ou cisalhamento.

Concebida para ser enrolada à volta do braço e fixada com o velcro incluído.

40303 18 L x 13 W x 1/4 H" 45.72 x 33.02 x .64 cm



Produto apresentado em utilização em apoios para mãos/punhos, almofadas para braços e almofadas contornadas para braços.


Correia estabilizadora para braço/mão

Esta cinta reutilizável possui uma secção de polímero macio para proteger a pele do paciente enquanto estabiliza o braço/mão. A cinta é fixada com velcro.

40315	Curto	25 L x 2 W x 1/4 H" 12 1/2 L x 2 W x 1/4 H" (apenas área de polímero)	63.5 x 5.08 x .64 cm
40317	Longo	36 L x 2 W x 1/4 H" 15 1/2 L x 2 W x 1/4 H" (apenas área de polímero)	91.44 x 5.08 x .64 cm



Mostrado com cinta estabilizadora

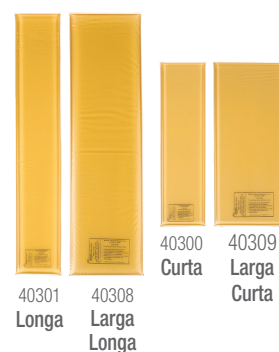

40301 Longa

40308 Larga Longa


40300 Curta

40309 Larga Curta

Almofadas para braços

Para utilização em extensões de mesa com apoio de braço padrão para proteger as áreas do bíceps, cotovelo e antebraço do paciente.

40300	Curta	15 L x 4 W x 1/4 H"	38.1 x 10.16 x .64 cm
40301	Longa	24 L x 4 W x 3/8 H"	60.96 x 10.16 x .95 cm
40309	Larga Curta	15 L x 6 1/2 W x 1/4 H"	38.1 x 16.51 x .64 cm
40308	Larga Longa	24 L x 6 1/2 W x 3/8 H"	60.96 x 16.51 x .95 cm

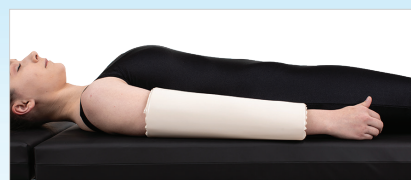


Hook and loop attachment

Almofada Toboggan

Esta almofada destina-se a ser utilizada com a proteção para braços/pernas (tobogã). Juntas, fixam a posição dos braços ou pernas na mesa e protegem o paciente de ser pressionado ou beliscado durante o procedimento.

A almofada de polímero amortece e ajuda a proteger os nervos ulnar e radial do braço. A pequena bolsa de película encaixa-se na proteção e a almofada é fixada por um fecho de velcro (incluído).

A proteção só é vendida com o conjunto.

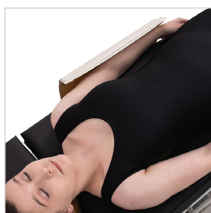

Mostrado com apoio para o calcanhar



Fixação com velcro

40130	Almofada Toboggan	16 ¼ L x 8 ¼ W x ¾ H"	41.27 x 20.96 x .95 cm
S40130*	Conjunto Almofadas para tobogã	16 ¼ L x 8 ¼ W x ¾ H"	41.27 x 20.96 x .95 cm
	Tamanho do escudo =	15 ½ L x 18 ¼ W"	39.37 x 46.4 cm


*A garantia cobre apenas a almofada.

*A proteção para os braços Toboggan não está disponível para venda ou envio fora dos Estados Unidos e Canadá.

Capa para suporte Mayo

Utilize para evitar pressão e danos nos nervos quando o membro estiver posicionado no suporte Mayo durante os procedimentos.

A almofada de polímero de 5/8" é selada ao longo de três lados com uma película espessa e durável, criando uma bolsa que desliza facilmente na parte superior do suporte Mayo.

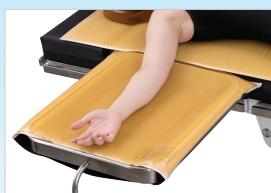

40717 21 L x 18 ½ W x ¾ H" 53.3 x 47 x 1.6 cm

“ O Currículo Básico para o Primeiro Assistente de Enfermagem, 5.ª Edição, afirma que, durante a substituição do ombro, o braço operatório braço será coberto com um campo cirúrgico para permitir a manipulação intraoperatória; podem ser utilizados dispositivos mecânicos para auxiliar na manipulação ou um suporte Mayo acolchoado para apoiar o braço.


“ Além disso, a Diretriz 3.15 da AORN afirma: Evite que o corpo do paciente entre em contacto com partes metálicas da mesa de operação e outras superfícies duras (por exemplo, o suporte Mayo). [Recomendação]

Almofada para mesa em forma de ampulheta


Revestimento reutilizável de polímero de 1/2" concebido para procedimentos cirúrgicos que envolvam o antebraço, cotovelo ou mão, utilizando a mesa de mão em forma de ampulheta. Ideal para microcirurgias prolongadas nas mãos que exigem pressão adicional e suporte para alívio de cisalhamento. Compatível com a maioria das mesas cirúrgicas padrão em forma de ampulheta.



40330 32 L x 24 W x ½ H" 81.28 x 60.96 x 1.27 cm
16"W secção central 40.6 cm secção central

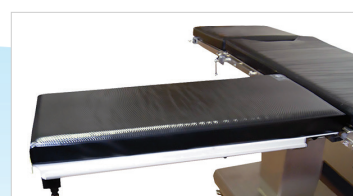

Polímero AKTON com superfície de película macia e flexível

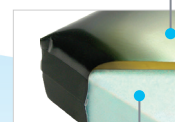

Espuma de alta densidade

Almofada composta para mesa de mão

Concebido para procedimentos cirúrgicos que envolvam o antebraço, cotovelo ou mão. Ideal para microcirurgias prolongadas nas mãos que exigem pressão adicional e suporte para alívio de cisalhamento. A almofada combina uma superfície de polímero AKTON para o paciente sobre uma base de espuma de alta densidade com construção totalmente soldada e sem costuras. Esta almofada foi projetada/construída com os mesmos benefícios de gerenciamento de pressão que as almofadas para mesa de cirurgia "Original" da Action Products.

40320 34 L x 16 W x 2 ¾ H" 86.36 x 40.64 x 6.03 cm



40304P
Pediátrico

40304
Pequeno

40304L
Grande

Protetor do nervo ulnar

Esta almofada ajuda a proteger o nervo ulnar do paciente, proporcionando maior visibilidade e acesso para IV ou linha A para o anestesiológista. A almofada é colocada em torno do cotovelo e fixada com velcro. A circunferência máxima da almofada é de aproximadamente 15,75" no tamanho pequeno e 19" no tamanho grande.

40304	Pequeno	15 ¾ L x 6 W x ½ H"	40 x 15.24 x 1.27 cm
40304L	Grande	19 L x 8 ½ W x ½ H"	48.26 x 21.6 x 1.27 cm
40304P	Pediátrico	10 L x 3 W x ¼ H"	25.4 x 7.6 x .6 cm



Pediátrico



Adulto		
40616	12 ½ L x 4 ¾ W x 3 ¾" H	31.75 x 11.11 x 8.57 cm
40617	16 ½ L x 4 ¾ W x 3 ¾" H	41.91 x 11.11 x 8.57 cm
40618	20 ½ L x 4 ¾ W x 3 ¾" H	52.07 x 11.11 x 8.57 cm
40619	12 L x 6 W x 5" H	30.48 x 15.24 x 12.7 cm
40620	16 L x 6 W x 5" H	40.64 x 15.24 x 12.7 cm
40621	20 L x 6 W x 5" H	50.8 x 15.24 x 12.7 cm

Pediátrico		
40639	6 L x 2 W x 2" H	15.24 x 5.08 x 5.08 cm
40640	8 L x 2 W x 2" H	20.32 x 5.08 x 5.08 cm
40641	10 L x 2 W x 2" H	25.4 x 5.08 x 5.08 cm
40642	12 L x 2 W x 2" H	30.48 x 5.08 x 5.08 cm
40643	6 L x 3 W x 3" H	15.24 x 7.62 x 7.62cm
40644	8 L x 3 W x 3" H	20.32 x 7.62 x 7.62cm
40645	10 L x 3 W x 3" H	25.4 x 7.62 x 7.62cm
40646	12 L x 3 W x 3" H	30.48 x 7.62 x 7.62cm

Rolos para peito

Esta linha de rolos torácicos de fundo plano foi concebida para proporcionar um apoio estável na posição prona. Estão disponíveis numa ampla variedade de alturas e comprimentos para acomodar praticamente qualquer paciente, desde adultos a recém-nascidos.



Capas descartáveis para rolos torácicos

As capas descartáveis para rolos torácicos da Action, resistentes a fluidos e não esterilizadas, são feitas de um filme macio e flexível, concebido para prolongar a vida útil do rolo torácico e reduzir a exposição a fluidos durante a utilização.

As capas deslizantes imitam o tamanho e a forma do rolo torácico e têm uma aba de película sobreposta ao longo da parte inferior plana.


Compre em caixas de 25 unidades.

Fits Action® Rolo para peito		
40616DC	40616	Caixa c/ 25
40617DC	40617	Caixa c/ 25
40618DC	40618	Caixa c/ 25
40619DC	40619	Caixa c/ 25
40620DC	40620	Caixa c/ 25
40621DC	40621	Caixa c/ 25



Capa para rolo axilar

Concebida para melhorar os rolos de posicionamento básicos de espuma com capas reutilizáveis de polímero envolvente. As capas são ajustáveis e fixadas por velcro.

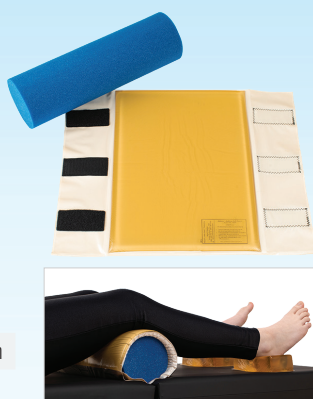

40601 17 L x 12 W x ½" H 43.18 x 30.48 x 1.27 cm

Capa para rolo torácico

Concebido para melhorar os rolos de espuma básicos para o peito com capas envolventes reutilizáveis em polímero. As capas são ajustáveis e são fixadas por velcro.




40600 18 L x 18 W x ½" H 45.72 x 45.72 x 1.27 cm

POSICIONAMENTO DO PEITO/TORSO/QUADRIL




Posicionador lateral

Concebido para proteger o paciente enquanto se encontra na posição lateral. Acomoda tanto o ombro como o braço. Proporciona alívio da pressão e proteção dos nervos. Inclui uma espuma leve com revestimento em polímero AKTON.

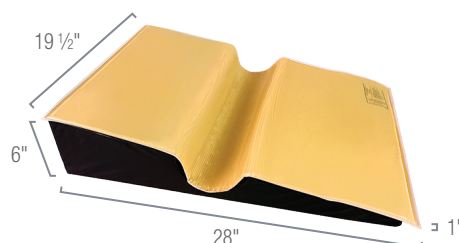


40610 28 L x 19 1/2 W x 6 - 1" H 71.12 x 49.53 x 15.24 - 2.54 cm

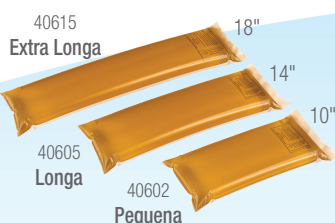

Posicionador de pacientes

A AORN incentiva o uso de rolos axilares em vez de sacos de areia ou bolsas IV. Esses posicionadores extremamente versáteis são bons para muitos procedimentos.

40602	Pequena	10 L x 4 1/4 W x 1 7/8" H	25.4 x 10.8 x 4.76 cm
40605	Longa	14 L x 4 W x 2" H	35.56 x 10.16 x 5.08 cm
40615	Extra Longa	18 L x 4 W x 2" H	45.72 x 10.16 x 5.08 cm

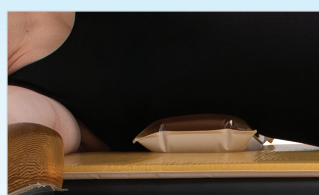

Posicionador torácico graduado

A configuração graduada, ou inclinada, desta almofada incentiva....


Extensão completa do tórax. Concebido para procedimentos cardiovasculares ou torácicos, que exigem hiperextensão completa do tórax.

40604 14 L x 9 W x 2 - 1 1/2" H 35.56 x 22.86 x 5.08 - 3.81 cm

Conjunto de posicionamento do peito

uniformemente à área dos ombros e do peito do paciente, com bordas moldadas para a axila. Eles proporcionam o posicionamento da parte superior do corpo, ao mesmo tempo que aliviam a pressão na área do tórax.

40625	Esquerda	28 - 23 3/4 L x 8 x 3 x 2 1/2" H	71.12 x 58.42 x 20.32 x 7.62 x 6.35 cm
40626	Direita	28 - 23 3/4 L x 8 x 3 x 2 1/2" H	71.12 x 58.42 x 20.32 x 7.62 x 6.35 cm

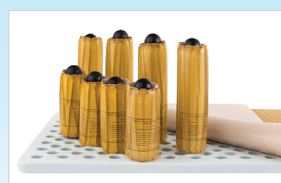

Conjunto de almofadas para painéis perfurados

O conjunto de almofadas para placas perfuradas Action@complementa a maioria dos sistemas de posicionamento padrão para placas perfuradas.

Este conjunto de várias peças foi concebido para proteger a pele e os tecidos moles do paciente contra pressões e forças de cisalhamento prejudiciais enquanto se encontra na posição lateral de alta pressão.

A sobreposição de comprimento médio (artigo n.º 40100) fica sobre o painel perfurado (por baixo do paciente), enquanto as almofadas ajustáveis para pinos de comprimentos variados envolvem facilmente os pinos e são fixadas por velcro.

A sobreposição e as almofadas para pinos estão disponíveis como um conjunto ou como unidades individuais.



Conjunto (#40719) inclui:

- 1 almofada de sobreposição média, #40100
- 4 almofadas curtas para postes, #40719A
- 4 almofadas altas para postes, #40719B



Placa de pinos e pinos não incluídos

40719	Placa c/ Pinos e Almofada p/ poste	Inclui (1) 40100, (4) 40719A, (4) 40719B
40719A	Almofada para poste curto	5 L x 5 W x 5 1/2" H 12.7 x 12.7 x 13.97 cm
40719B	Almofada para poste alto	5 L x 5 W x 8 1/2" H 12.7 x 12.7 x 20.32 cm
40100	Sobreposição média	46 L x 20 W x 1/2" H 117 x 50 x 1.3 cm

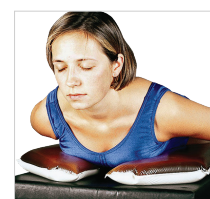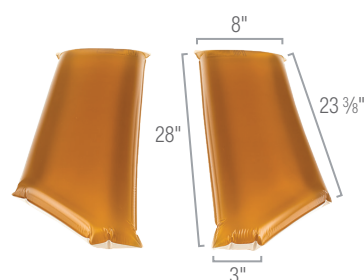

Correia de posicionamento

Costuras soldadas e película resistente a fluidos combinadas com uma superfície de polímero macia voltada para o paciente tornam este produto indispensável para a sala de operações.


Radiotransparente e seguro para ressonância magnética.

Os acessórios de velcro fixam a cinta a mesas padrão. A cinta mais longa foi especificamente concebida para pacientes de maior porte.

Esta cinta não se destina a imobilizar o paciente.



40713	57 L x 4 W x ¼" H	144.78 x 10.16 x .64 cm
	A superfície de polímero AKTON mede 98 x 8.2 x 0.6cm	
	Faixa ajustável: 28 x 43" 71.12 x 109.22 cm	
40713L	90 L x 4 W x ¼" H	228.6 x 10.16 x .64 cm
	Superfície em polímero AKTON com dimensões de 190.5 x 8.2 x 0.6cm	
	Intervalo de ajuste: 59½ x 79½" 151.13 x 201.93 cm	

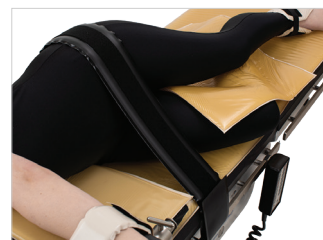

Posicionador ortopédico para anca

Concebido para complementar a abordagem anterior supina à artroplastia total da anca, este posicionador de anca exclusivo foi projetado para proporcionar um acesso consistente e ideal ao local e estabilidade ao paciente, protegendo simultaneamente a integridade da pele do paciente.

41740	8 ½ L x 16 W x 2.63" H	21.59 x 40.64 x 6.68 cm
--------------	------------------------	-------------------------



Cinta para ombro, conjunto de 2 peças

Almofadas reutilizáveis de polímero com 2,5 cm de espessura, concebidas para cintas de ombro básicas. As almofadas ajustáveis envolvem as cintas e são fixadas por presilhas de velcro. Vendidas em pares.

40302	5 L x 6 W x 1" H	12.7 x 15.24 x 2.54 cm
--------------	------------------	------------------------

Vac-Pac® Capas




Esta almofada foi concebida para revestir o interior do posicionador Olympic Vac-Pac® (saco de feijão) para ajudar a mitigar a pressão e o atrito do paciente enquanto este se encontra na posição lateral. É aplicável em procedimentos ortopédicos, torácicos ou urológicos que exigem que o paciente se mantenha estável na posição lateral.

Vac-Pac® é uma marca registrada da Natus Medical Incorporated

40612	Vac-Pac® Capa tamanho médio 30	37 L x 28 W x ½" H	93.98 x 71.12 x 1.27 cm
40612-31	Vac-Pac® Capa tamanho grande 31	35 ½ L x 38 ¾ W x ½" H	90.17 x 98.43 x 1.27 cm
40613	Vac-Pac® Capa forma T tamanho 35	15 L x 34 W x ½" H (inferior) 9 L x 23 W x ½" H (superior)	38.1 x 86.36 x 1.27 cm (inferior) 22.86 x 58.42 x 1.27 cm (superior)

Almofada para mesa de biópsia mamária

Melhore o conforto da paciente com esta almofada macia de polímero que ajuda a proteger a pele e as proeminências ósseas enquanto na posição prona durante procedimentos de biópsia mamária.

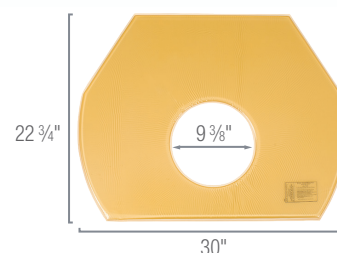

40715	30 L x 22 ¾ W x ¾" H com recorte de 9 ¾" D	76.2 x 57.79 x .95 cm com recorte de 23.81 cm D
--------------	--	---

Kits de recobrimento

Recobrimento rápido e fácil de pequenos cortes ou abrasões em qualquer superfície de polímero Akton®.

KIT002	4 x 4"	10.16 x 10.16 cm
KIT003	36 x 4"	91.44 x 10.16 cm






Apoio para o calcanhar

Suporte reutilizável para o calcanhar em polímero, concebido para manter os calcanhares suspensos acima da superfície da almofada da mesa enquanto o paciente está em posição supina.

O apoio macio para o calcanhar apresenta um entalhe em forma de V para posicionar e acomodar o tendão de Aquiles e uma cavidade esculpida para acolher e posicionar com segurança o pé numa posição neutra.

40502 6 L x 3 1/4 W x 1 3/4" 15 x 8.3 x 4.5 cm

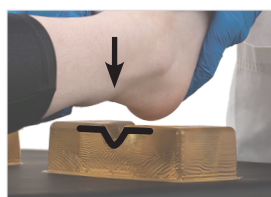

Almofada protetora do calcanhar

Esta almofada estilo «concha» oferece proteção total para o tornozelo e o calcanhar durante cirurgias longas. A superfície interior da almofada tem uma marcação permanente para garantir o posicionamento correto do pé. Fácil de usar e segura, com fixação ajustável por velcro.

Acomoda aproximadamente uma circunferência do tornozelo de 15 polegadas. Use sozinha na posição supina e lateral ou combine com a cinta de tornozelo e as almofadas Candy Cane para a posição litotômica.

40401 12 1/2 L x 7 3/4 W x 1 1/2 H" 32 x 20 x 1.2 cm




Almofadas para joelho

Três tamanhos e espessuras disponíveis para forrar muletas de joelho e ajudam a reduzir a pressão e o atrito no espaço poplíteo.

PEQUENO: Almofada mais fina, ideal para suporte leve em procedimentos urológicos, obstétricos/ginecológicos e pediátricos.

MÉDIO: 85% maior do que o pequeno, esta almofada de 1/4" oferece suporte de peso médio para procedimentos urológicos e ginecológicos/obstétricos.

GRANDE: Almofada pesada com 1/2" de espessura e 22 x 20", mais adequada para muletas grandes para joelhos.

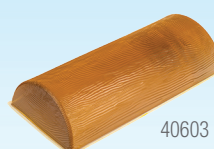

40603



Mostrados com apoio para o calcanhar e sobreposição

Posicionadores em forma de cúpula

O design semicircular com configuração de fundo plano proporciona proteção contra pressão sob os joelhos enquanto o paciente está em posição supina. Ajuda a proteger o paciente contra queda do pé para pacientes em posição prona.

Pode ser usada sob o metatarso ou sob o pé, contra a prancha ou na posição semi-Fowler.

40603 14 L x 6 W x 3 H" 36 x 15 x 7.6 cm

40402 Pequeno 11 L x 9 W x 3/8 H" 27.9 x 22.9 x .95 cm

40403 Médio 17 L x 11 W x 1/4 H" 43 x 27.9 x .6 cm

40404 Grande 22 L x 20 W x 1/2 H" 56 x 50 x 1.2 cm

Correia de posicionamento

Costuras soldadas e película resistente a fluidos combinadas com uma superfície de polímero macia voltada para o paciente tornam este produto indispensável para a sala de operações.


Radiotransparente e seguro para ressonância magnética.

Os fechos de velcro fixam a cinta a mesas padrão. A cinta mais longa foi especificamente concebida para pacientes de maior porte.

Esta cinta não se destina a imobilizar o paciente.



40713	57 L x 4 W x ¼" H	144.78 x 10.16 x .64 cm
	A superfície de polímero AKTON mede 98 x 8.2 x 0.6cm	
	Faixa ajustável: 28 x 43" 71.12 x 109.22 cm	
40713L	90 L x 4 W x ¼" H	228.6 x 10.16 x .64 cm
	A superfície de polímero AKTON mede 190.5 x 8.2 x 0.6cm	
	Faixa ajustável: 59½ x 79½" 151.13 x 201.93 cm	

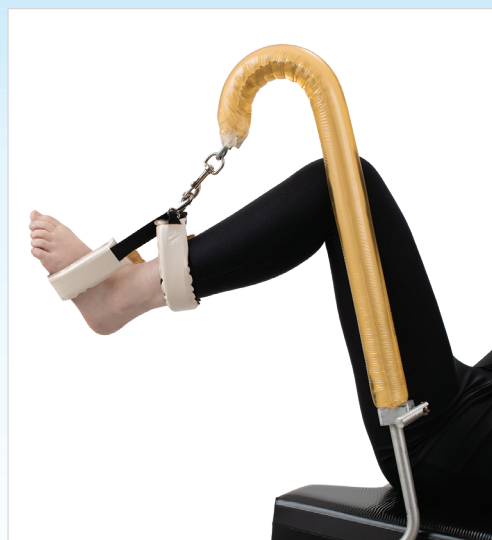

Conjuntos de almofadas para estribos Candy Cane

Utilizar na posição litotômica durante procedimentos ginecológicos e urológicos; protege o nervo fibular contra lesões por pressão e cisalhamento que podem resultar do contacto das pernas com os estribos metálicos. Produto macio, durável e reutilizável que elimina a necessidade de envolver e reenvolver repetidamente os suportes para as

Conjunto de almofadas Candy Cane



Recomenda-se a utilização do conjunto de almofadas para tornozelos Action® e protetores de calcanhar/tornozelo de cobertura total para maior proteção do paciente.

**Suportes litotômicos não incluídos*

40501 Candy Cane (conjunto de 2) 28 L x 2 OD x 1 ID" 71 x 5 x 2.5 cm

Alça para tornozelo Almofadas para estribos

Grande

Pequena



Conjuntos de almofadas para estribos com correias para tornozelos

Duas correias de polímero ajustáveis são combinadas para apoiar e proteger a perna e o pé do paciente enquanto a perna está suspensa na posição litotômica.

40510	Almofadas para estribos com correias para tornozelos, Pequenas (conjunto de 2)	12 ½ L x 1 ¾ W x ¾ H"	31.7 x 4.7 x .95 cm
40511	Almofadas para estribos com tira para o tornozelo, Grande (conjunto de 2))	17 ¾ L x 1 ¾ W x ¾ H"	44.1 x 4.7 x .95 cm

Conjunto de almofadas confortáveis para calcanhares

Almofadas de polímero leve para conforto e apoio, protegem os calcanhares contra pressão e lesões por cisalhamento. Podem ser usadas em conjunto com meias antiembolia. Adequadas para recuperação e radiologia. Alça de fixação confortável totalmente em polímero, prende-se com velcro simples. Tamanho único.



40520 (Conjunto de 2) 4 ¼ L x 3 ¾ W x ½ H" 10.8 x 9.2 x 1.2 cm


Almofada Toboggan

Esta almofada destina-se a ser utilizada com a proteção para braços/pernas (tobogã). Juntas, fixam a posição dos braços ou pernas na mesa e protegem o paciente de ser pressionado ou beliscado durante o procedimento.

A almofada de polímero amortece e ajuda a proteger os nervos ulnar e radial do braço.

A pequena bolsa de película encaixa-se na proteção e a almofada é fixada por um fecho de velcro (incluído).


A proteção só é vendida com o conjunto.

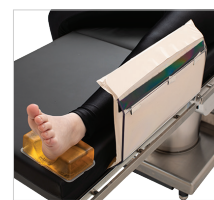

Mostrado com apoio para o calcanhar



Fixação com velcro

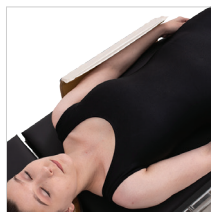

40130	Almofada Toboggan	16 1/4 L x 8 1/4 W x 3/8 H"	41.27 x 20.96 x .95 cm
S40130*	Conjunto de almofadas Toboggan	16 1/4 L x 8 1/4 W x 3/8 H"	41.27 x 20.96 x .95 cm
	Tamanho do escudo =	15 1/2 L x 18 1/4 W"	39.37 x 46.4 cm

*A garantia cobre apenas a almofada.

*O protetor de braço Toboggan não está disponível para venda ou envio fora dos Estados Unidos e Canadá.



Peça única



Conjunto de duas peças



Posicionador de pernas em forma de sapo

Concebido para a colheita da veia safena; o contorno e a construção da almofada melhoram o acesso ao local, proporcionando um apoio estável.


A cobertura de polímero Akton® protege contra lesões por pressão e cisalhamento, e a base de espuma estável (espuma viscoelástica sobre espuma de alta densidade) é revestida por um material resistente à água e elástico em quatro direções, totalmente soldado para impedir a entrada de fluidos.

O produto reutilizável elimina a necessidade do uso desperdiçador de cobertores ou toalhas empilhados e sacos de areia.


Está disponível uma sobreposição de polímero de substituição, artigo 40718LPA. A sobreposição possui velcro para fixá-la à base revestida de tecido.

O design de duas peças permite o posicionamento independente das pernas.

40718LP	Posicionador de pernas em posição de sapo	32 L x 21 W x 5 H"	81.3 x 53.3 x 12.7 cm
		inclui polímero AKTON 1/4"	inclui polímero AKTON 0.6 cm
40718LPA	Polímero para pernas de rã Substituição	35 L x 21 W x 1/4 H"	88.9 x 53.3 x .6 cm
40718LP-2	Posicionador de pernas em posição de sapo (Posicionador de 2 peças)	32 L x 10 1/2 W x 5 H"	81.3 x 26.6 x 12.7 cm
		inclui polímero AKTON 1/4"	inclui polímero AKTON 0.6 cm

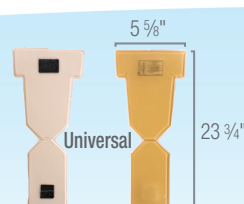

Universal

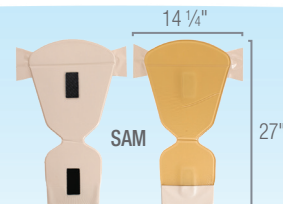

SAM

Conjunto de almofadas para estribos

Forro macio e reutilizável para bota litotômica em polímero com 0,6 cm de espessura, concebido para proteger a parte inferior da perna e a zona do calcanhar do paciente, reduzindo a pressão e o atrito.

Para utilização com estribos universais e inclui fixações de velcro para prender ao hardware.

Utilizado na posição litotômica para casos ginecológicos e urológicos.

40500	Universal (Set of 2)	23 3/4 L x 5 5/8 W x 1/4 H"	60.3 x 13.7 x .6 cm
40503	SAM (Set of 2)	27 L x 14 1/4 W x 1/4 H"	68.5 x 36 x .6 cm



Apresentado com bota SAM

Almofada para pés da mesa de fraturas

Para utilização em suportes para preparação das pernas e suportes para pés em mesas para fraturas, para proteção contra lesões por pressão e cisalhamento.




40400	12 L x 4 W x 1/4 H"	30.5 x 10 x .6 cm
--------------	---------------------	-------------------



Os nossos produtos reutilizáveis são concebidos para ajudar a preservar a integridade da pele e proporcionar conforto e estabilidade em cirurgias altamente especializadas.

À esquerda: Conjunto de almofadas Wilson Frame com apoio para a cabeça Action® Prone, apoio para os braços composto e contornado, sobreposição pequena e rolo para o peito.

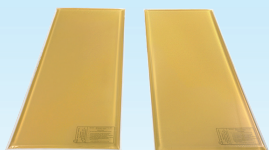

Conjunto de almofadas para estrutura Wilson

Concebido para cobrir a estrutura Wilson e proteger os pacientes contra lesões por cisalhamento e pressão. Estas almofadas com 1/2" de espessura e almofadas robustas com 1" de espessura deslizam facilmente sobre a estrutura e devem ser fixadas com fixação de velcro.

Para procedimentos ortopédicos e neurocirúrgicos quando a estrutura Wilson é utilizada. Conjunto de duas peças.

40701	1/2" de espessura	29 L x 10 W x 1/2" H"	74 x 25.4 x 1.3 cm
40702	1" de espessura	29 L x 10 W x 1" H"	74 x 25.4 x 2.5 cm




Conjunto de almofadas para estrutura espinal Kambin

Concebido para se adaptar à estrutura espinal Kambin original.

Este conjunto de almofadas de duas peças encaixa-se nos suportes para pacientes da estrutura. As almofadas com 1,27 cm de espessura são fixadas à estrutura por meio de presilhas de velcro incluídas, posicionadas ao longo da parte inferior de cada almofada, bem como em abas (2 por almofada) que se dobras e prendem às bordas externas da estrutura.

40712	33 L x 13 3/4 W x 1/2" H"	13 L x 5.41 x 1.3 cm
--------------	---------------------------	----------------------

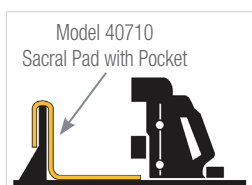


Almofada McGuire para anca/sacro

Esta almofada de polímero de 1,27 cm protege o ílio, o sacro e a área sobre o trocanter maior contra danos causados por cisalhamento e pressão enquanto o paciente está em posição lateral na estrutura.

Um bolso é criado dobrando a extremidade curva da almofada sobre si mesma e prendendo o velcro. Para colocar na estrutura, deslize o bolso sobre a placa traseira, permitindo que o resto da almofada cubra o interior da placa traseira e a base da estrutura.

40710	26 L x 10 W x 1/2" H"	66 x 22.5 x 1.3cm
--------------	-----------------------	-------------------

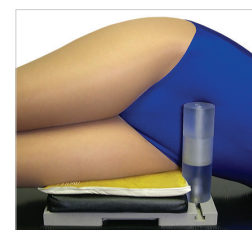

Almofada de Montreal

Uma almofada de posicionamento para a plataforma principal do Dispositivo de Posicionamento Lateral Montreal. Esta almofada é utilizada numa posição lateral para mitigar a pressão e o atrito relacionados com procedimentos totais da anca.

40110	18 1/4 L x 12 W x 1/2" H"	46.3 x 30.5 x 1.3 cm
--------------	---------------------------	----------------------

Almofada para quadril da mesa de fraturas

Concebida para utilização na placa da mesa para fraturas, a principal função desta almofada é reduzir a pressão e o atrito na região sacral.



Almofada para quadril com orifício para poste para mesa de fraturas

Esta almofada para o quadril em formato oval possui um orifício interno de 1,75" para acomodar o suporte perineal.

A almofada foi concebida para proteger as áreas da parte superior da perna e do escroto do paciente contra lesões cutâneas causadas por pressão ou forças de cisalhamento durante a utilização.



Almofada para coluna vertebral para mesa de fraturas

Esta almofada envolvente com 1,27 cm de espessura reduz a pressão e o atrito na escroto e parte superior das pernas do paciente.

Também elimina a tarefa tediosa de envolver e voltar a envolver o poste da mesa de fraturas com vários itens improvisados, como gaze e toalhas.



40704
Almofada
pós-operatória

40703	Almofada para quadril	8 L x 5 1/2 W x 1/2 H"	20 x 14 x 1.3 cm
40704	Almofada para correio	7 L x 5 W x 1/2 H"	18 x 12.7 x 1.3 cm
40707	Almofada para anca com orifício para poste	3 1/8 x 3 7/8 x 1 1/4 OD"; 2 1/8 x 2 5/8 x 1 5/16 ID" 1 3/4" de diâmetro para acomodar os postes perineais	4.5 cm de diâmetro do orifício



Andrews Frame™ Correia ilíaca

Sistema de cinta ajustável de duas peças com cinto de tecido de nylon resistente e almofada de polímero removível. Polímero removível. A almofada reduz a pressão e as forças de cisalhamento na crista ilíaca e na parte superior das coxas.

A almofada de polímero cobre até 61 cm nas ancas. A cinta é fixada com um fecho ajustável de velcro.


40706	Correia ilíaca	24 L x 6 W x 3/8 H"	61 x 15 x .95 cm
-------	----------------	---------------------	------------------

Joelheira Andrews Frame™

Joelheira concebida para utilização com a Andrews Frame® na plataforma do joelho para aliviar a pressão e o atrito durante a utilização.

40705	Joelheira	23 L x 16 1/4 W x 1 H"	56 x 40.6 x 2.5 cm
-------	-----------	------------------------	--------------------

Almofada de polímero AKTON de 3/8"

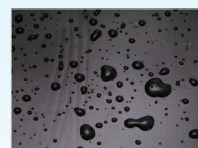

Action® Capa confortável para banco

Action® Capa confortável para banco - Almofada de polímero Akton® com 3/8" de espessura colada a uma faixa de nylon oxford de 4" com fecho de cordão.

40900	13 D x 3/8" H	33.02 x .95 cm
40901	14 D x 3/8" H	35.56 x .95 cm
40902	15 D x 3/8" H	38.1 x .95 cm

Almofadas para a cabeça em forma de rosca

Concebidas para proteger e apoiar a cabeça do paciente, estas almofadas permitem um fácil acesso à área cirúrgica da cabeça e pescoço. Podem ser utilizadas em diversos procedimentos, incluindo otorrinolaringologia, cirurgia plástica, cirurgia geral e oftalmologia.

Disponíveis no estilo tradicional ou côncavo.

40202	Pediátrica	5 ½ OD x 2 ¼ ID x 1 ¼ H"	14 OD x 5.7 ID x 3.2 cm
40219	Pediátrica/ Neonatal	4 ½ OD x 2 ID x 1 H"	11.4 OD x 5.1 ID x 2.5 cm
40203	Neonatal	3 ¼ OD x 1 ½ ID x ¾ H"	8.3 OD x 3.8 ID x 2 cm

Tamanhos para adolescentes/adultos disponíveis

Almofadas para a cabeça em forma de rosca com prato central

40202D	Pediátrica com prato central	5 ½ OD x 2 ½ ID x 1 ¼ H"	14 OD x 6.4 ID x 3.2 cm
40203D	Neonatal com prato central	3 ¼ OD x 1 ½ ID x ¾ H"	8.3 OD x 3.8 ID x 2 cm

Tamanhos para adolescentes/adultos disponíveis

Almofadas para a cabeça em forma de ferradura

A configuração em ferradura proporciona uma passagem de ar livre e auxilia o anestesiológista enquanto os pacientes estão em posição lateral e prona, com a cabeça virada para o lado.



40205	Pediátrico	5 ½ OD x 2 ¼ ID x 1 ¼ H"	14 OD x 5.7 ID x 3.2 cm
40220	Pediátrico/ Neonatal	4 ½ OD x 2 ID x 1 H"	11.4 OD x 5.1 ID x 2.5 cm
40206	Neonatal	3 ¼ OD x 1 ½ ID x ¾ H"	8.3 OD x 3.8 ID x 2 cm

Tamanhos para adolescentes/adultos disponíveis

Protetor de testa

O protetor de testa é semicircular com uma base plana. É utilizado para proteger a testa do paciente infantil ou criança da pressão exercida pelos tubos de oxigênio.


40208	2 ½ L x 1 ¾ W x ¾ H"	6.4 x 4.1 x 1.6 cm
--------------	----------------------	--------------------



► Mais de 80% dos principais hospitais pediátricos dos EUA utilizam produtos Action® para proteger os seus pacientes.



Almofada em forma de rosca para cabeça pediátrica

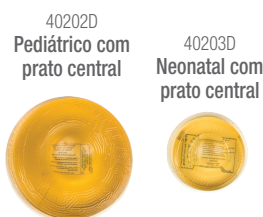

Neonatal com prato central ampliado para mostrar o estilo côncavo.



Almofada para a cabeça com cavidade central

Concebida para pacientes mais pequenos, esta almofada para a cabeça quadrada e moderadamente côncava pode ser utilizada para reduzir a pressão no occipício, pescoço, cabeça ou orelhas do paciente, conforme necessário.

40221	Pediátrico	6 L x 6 W x 1 H"	15.2 x 15.2 x 2.5 cm
--------------	------------	------------------	----------------------

Tamanhos para adolescentes/adultos disponíveis



Encosto de cabeça oftalmológico

Os contornos exclusivos desta almofada para cabeça em posição supina oferecem amplo apoio para o pescoço do paciente, posicionando a cabeça em uma cavidade oval central para reduzir a pressão e melhorar a estabilidade da cabeça durante o uso. Adequada para a maioria dos procedimentos em posição supina, a almofada para cabeça foi originalmente projetada para cirurgias oftalmológicas mais longas e possui duas áreas elevadas em cada lado da almofada para oferecer um apoio suave às mãos do cirurgião. Opção adequada para pacientes que necessitam de apoio adicional para o pescoço.

40217-P	Pediátrico	8 ½ L x 7 ½ W x 2 ¼ H"	21.6 x 19 x 5.7 cm
----------------	------------	------------------------	--------------------

Tamanhos para adolescentes/adultos disponíveis



PRODUTOS DE POSICIONAMENTO PEDIÁTRICO



Protetor do nervo ulnar

Esta almofada ajuda a proteger o nervo ulnar do paciente, proporcionando maior visibilidade e acesso para IV ou linha A para anestesiológista. A almofada é colocada em torno do cotovelo e presa com velcro.

40304P	Pediátrico	10 L x 3 W x ¼ H"	25.4 x 7.6 x .6 cm
---------------	------------	-------------------	--------------------

Tamanhos para adolescentes/adultos disponíveis



Protetores universais para manchas

Esta série de almofadas finas e redondas foi concebida para proporcionar opções de acolchoamento adaptáveis para as áreas difíceis de proteger, específicas de cada paciente. A forma foi concebida para melhorar a redistribuição da pressão e o desempenho de cisalhamento.

Perfil fino, polímero com 0,6 cm de espessura




40405	Mini	1 ½ D x ¼ H"	4.1 D x .6 cm	Pkg of 12
40406	Pequeno	3 ¼ D x ¼ H"	8.3 D x .6 cm	Pkg of 12
40407	Grande	5 ½ D x ¼ H"	14 D x .6 cm	Pkg of 6

Almofadas para UTI neonatal



Proporciona uma superfície de gestão da pressão e do cisalhamento para pacientes pediátricos e neonatais.

40120L	Almofada Isolette	26 L x 16 W x ½ H"	66 x 40.6 x 1.3 cm
40121	Almofada Isolette	29 L x 19 W x ½ H"	74 x 48.2 x 1.3 cm
40120	Almofada para berço	26 L x 12 W x ½ H"	66 x 30.5 x 1.3 cm

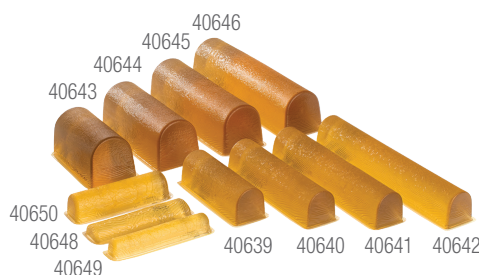

Rolos torácicos pediátricos

Concebida para pacientes mais pequenos, como recém-nascidos e crianças pequenas, esta linha de rolos torácicos de fundo plano proporciona um apoio estável na posição prona. Estão disponíveis numa ampla variedade de alturas e comprimentos para acomodar praticamente qualquer paciente pediátrico.

40639	6 L x 2 W x 2 H"	15.24 x 5.08 x 5.08 cm
40640	8 L x 2 W x 2 H"	20.32 x 5.08 x 5.08 cm
40641	10 L x 2 W x 2 H"	25.4 x 5.08 x 5.08 cm
40642	12 L x 2 W x 2 H"	30.48 x 5.08 x 5.08 cm
40643	6 L x 3 W x 3 H"	15.24 x 7.62 x 7.62 cm
40644	8 L x 3 W x 3 H"	20.32 x 7.62 x 7.62 cm
40645	10 L x 3 W x 3 H"	25.4 x 7.62 x 7.62 cm
40646	12 L x 3 W x 3 H"	30.48 x 7.62 x 7.62 cm

Tamanhos para adolescentes/adultos disponíveis

Posicionadores pediátricos/neonatais

Estes posicionadores são utilizados para posicionar bebês sem enrolar toalhas e outros itens.


40648	6 L x 1 ½ W x ¾ H"	15 x 3.8 x 2 cm
40649	6 L x 1 W x 1 H"	15 x 2.5 x 2.5 cm
40650	6 L x 1 ½ W x 1 ½ H"	15 x 3.8 x 3.8 cm

Tamanhos para adolescentes/adultos disponíveis

Posicionador axilar do paciente

A AORN incentiva o uso de rolos axilares em vez de sacos de areia ou bolsas IV. Estes posicionadores extremamente versáteis são bons para muitos procedimentos.

40602	10 L x 4 ¼ W x 1 ½ H"	25.4 x 10.8 x 4.76 cm
40605	14 L x 4 W x 2 H"	35.56 x 10.16 x 5.08 cm
40615	18 L x 4 W x 2 H"	45.72 x 10.16 x 5.08 cm

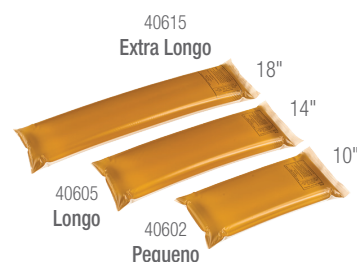

Conjunto de posicionadores pediátricos


Este conjunto versátil de 4 peças foi concebido para posicionar e proteger recém-nascidos, bebês e crianças pequenas durante uma variedade de procedimentos. Colocado na horizontal e utilizado sozinho, o posicionador canalizado ajuda a estabilizar os pacientes enquanto estão em posição supina. Utilizado em combinação com um rolo torácico sob a almofada na área torácica, o tórax é estendido para procedimentos torácicos anteriores. Além disso, quando utilizado com o pequeno rolo torácico sob o posicionador canalizado no tórax e o grande rolo torácico no sacro. O acesso para casos em decúbito dorsal posterior, como ressecção de tumor espinhal, é aprimorado.

Visite o nosso site para obter mais informações sobre este conjunto.



40614	4 Peças de posicionamento pediátrico: 40205, 40642, 40646, 40647
40647	Almofada retangular para canal 20 L x 9 W x 2 H" 50.8 x 22.9 x 5 cm

SUPINE Body Smart® Produtos de posicionamento

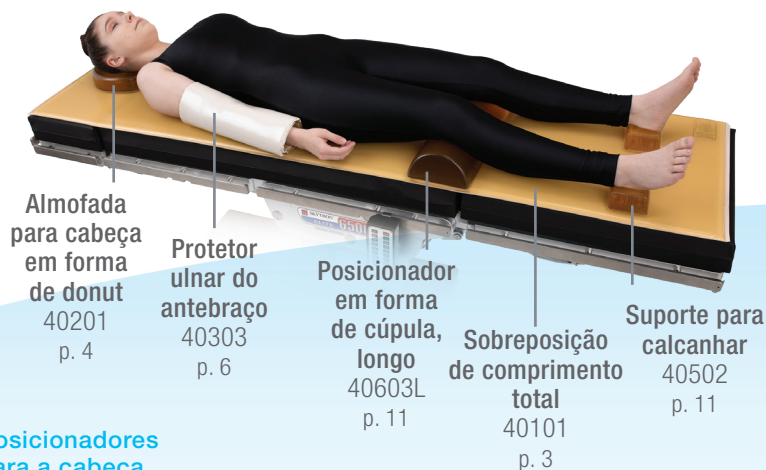

Posicionadores para a cabeça

- Almofada para cabeça em forma de donut | p. 4
- Almofada para cabeça em posição supina | p. 4
- Almofada para a cabeça com cavidade central | p. 4
- Almofada para cabeça contornada | p. 4
- Apoios de cabeça oftalmológicos | p. 5
- Encosto de cabeça oftalmológico tipo berço | p. 5
- Protetor de testa | p. 4

Posicionadores de braço/cotovelo/mão

- Protetor ulnar do antebraço | p. 6
- Protetor do nervo ulnar | p. 7
- Apoio para mão/punho | p. 6
- Apoios para braços contornados | p. 6
- Almofadas para apoios de braço | p. 6
- Correias estabilizadoras para braços/mãos | p. 6
- Almofada para tobogã | p. 7
- Capa para suporte Mayo | p. 7

Posicionadores para perna/tornozelo/calcanhar

- Posicionador em forma de cúpula | p. 11
- Alça de posicionamento | p. 12
- Apoio para o calcanhar | p. 11
- Almofada protetora do calcanhar | p. 11
- Conjunto de copos de conforto para calcanhar | p. 12
- Posicionador de pernas em posição de sapo | p. 13
- Capa para rolo axilar | p. 8

Superfícies de apoio

- Sobreposições | p. 3

LATERAL Body Smart® Produtos de posicionamento



Posicionadores de cabeça

- Almofada para a cabeça com apoio central | p. 4

Posicionadores de braço/cotovelo/mão

- Apoios de braços contornados | p. 6
- Almofadas para apoios de braços | p. 6
- Correias estabilizadoras para braços/ | p. 6

Posicionadores para peito/tronco/anca

- Posicionador axilar do paciente | p. 9
- Conjunto de almofadas para placa de encaixe | p. 9
- Posicionador lateral | p. 9
- Corrente de posicionamento | p. 12

Posicionadores para pernas/tornozelos/calcanhares

- Sobreposição pequena | p. 3
- Almofada protetora para calcanhar | p. 11

Superfícies de apoio

- Sobreposições | p. 3

Produtos de posicionamento PRONE Body Smart®



Posicionadores de cabeça

- Apoios de cabeça para posição prona | p. 5
- Almofada para cabeça em forma de ferradura | p. 5

Posicionadores de braços

- Almofadas para braços | p. 6
- Correias estabilizadoras para braços/mãos | p. 6
- Apoios de braços contornados | p. 6

Posicionadores para peito/tronco/anca

- Rolos para o peito | p. 8
- Posicionadores de peito | p. 9

Posicionadores para pernas/tornozelos/calcanhares

- Posicionadores em forma de cúpula | p. 11
- Capa para rolo axilar | p. 8

Posicionamento com estrutura especial

- Conjunto de almofadas para estrutura Wilson | p. 14
- Conjunto de almofadas para estrutura espinhal
- Kambin | p. 14

Superfícies de apoio

- Sobreposições | p. 3

LITHOTOMY Body Smart® Produtos de posicionamento



Posicionadores de cabeça

- Almofada para cabeça Donut | p. 4
- Almofada para cabeça em posição supina | p. 4
- Almofada para a cabeça com cavidade central | p. 4
- Almofada para a cabeça contornada | p. 4
- Apoios de cabeça oftalmológicos | p. 5
- Encosto de cabeça oftálmico | p. 5

Posicionadores de braço/cotovelo/mão

- Protetor ulnar do antebraço | p. 6
- Protetor do nervo ulnar | p. 7
- Apoios de braços contornados | p. 6
- Almofadas para apoios de braços | p. 6
- Correias estabilizadoras para braços/mãos | p. 6

Posicionadores para pernas/tornozelos/calcanhares

- Conjuntos de almofadas para estribos em forma de bastão de doces | p. 12
- Conjuntos de almofadas para estribos com correias para tornozelos | p. 12
- Almofada protetora para calcanhar | p. 11
- Conjunto de almofadas para estribos de bota | p. 13
- Conjunto de almofadas para estribos SAM | p. 13

Superfícies de apoio

- Sobreposições | p. 3



Saúde Portugal - Distribuidor Oficial

Avenida José Francisco Guerreiro, Paiã Park
Armazém A2.7 - 1675-077 Pontinha
Tel. +351 217 165 693
geral@saudeportugal.pt www.saudeportugal.pt

Reservamo-nos o direito a modificar os nossos produtos como apresentados,
e descritos neste guia, sem aviso prévio. Fotografias não contratuais.
Confirme a disponibilidade dos produtos junto da Saúde Portugal.